

Lo sterilizzatore da banco per gli ambulatori medici



Il nuovo sterilizzatore da banco PS 1202B



Veloce

Con il suo rapido processo di sterilizzazione il nuovo PS 1202B conquista un posto di rilievo tra gli sterilizzatori da banco. Diventa così la soluzione ottimale per le esigenze dell'ambulatorio medico. Inoltre, la funzione QUICKSTART fa risparmiare tempo nell'uso quotidiano dell'apparecchio e la rete capillare del servizio di assistenza tecnica Miele può intervenire rapidamente in caso di necessità.

Asciutto

Con la potente pompa sotto vuoto si raggiunge una sottopressione di ca. 20 mbar di pressione assoluta. Questa prestazione consente un allontanamento efficace dell'aria dalla camera di sterilizzazione e dall'oggetto da trattare. Il riscaldamento completo della camera – una tecnica brevettata da Miele – fa sì che vi sia un'ottima distribuzione del calore. L'irradiazione di calore su grandi superfici e l'alta resa di vuoto contribuiscono a un'asciugatura accurata e veloce dell'oggetto da sterilizzare.

Sicuro

Il PS 1202B è costruito come un grande sterilizzatore, con una camera di pressione riscaldata a vapore, a doppia parete. La sua tecnica accuratamente sviluppata assicura una distribuzione ottimale della temperatura nella camera e garantisce una sterilizzazione sicura di tutti gli strumenti impiegati nell'ambulatorio medico. Grazie all'interfaccia seriale si ha la possibilità di documentare il processo per una maggiore sicurezza della tracciabilità del processo.

Affidabile

Il display chiaro e ben leggibile consente un funzionamento particolarmente sicuro e un controllo del procedimento nei diversi programmi di applicazione e test. I programmi sono stati studiati per rispondere in maniera completa alle esigenze più diverse degli ambulatori medici. Ulteriori pregi del piccolo sterilizzatore Miele sono la silenziosità e i comandi semplici, l'impiego versatile della camera per differenti altezze dei tray e la chiusura elettrica dello sportello. La struttura dell'apparecchio è facile da mantenere e rende il PS 1202B un modello affidabile che necessita di scarsa manutenzione.

Sterilizzatore in classe B con un volume di camera da 20 l per tutte le esigenze degli ambulatori odontoiatrici.

Costruzione

- Apparecchio da banco
- Posizionabile a partire da una profondità di banco di 500 mm
- Misure H 533, L 565, P 580 mm
- Camera di sterilizzazione Ø 250 mm, lunghezza 400 mm
- Allacciamento corrente alternata 230 V, 50 - 60 Hz, 16 A
- Allacciamento idrico fisso con tubo di afflusso e di scarico acqua

SOLO MIELE!

Tecnica

- Camera a pressione a doppia parete per la generazione di vapore e il preriscaldamento contemporanei della camera di sterilizzazione
- Sistema integrato di trattamento dell'acqua (impianto di osmosi inversa)

Programmi

- 121°C universale : 33 min.
- 134°C universale : 21 min.
- 134°C prioni : 35 min.
- Test di Helix e B-D : 14 min.
- Prova del vuoto : 23 min.
(Durata totale con asciugatura, personalizzabile in base al carico)

Comfort d'uso


- Comandi semplici con tasti sul display
- Chiusura elettrica dello sportello
- Supporto girevole fino a 90° per l'inserimento di 6 tray o fino a 3 container
- Costruzione dell'apparecchio semplice da mantenere grazie a componenti facilmente accessibili

Sicurezza ed efficienza

- Interfaccia per la tracciabilità di processo
- Conforme alla normativa europea per dispositivi medici
- Risultati riproducibili, processo di convalida
- Visualizzazione dei risultati di processo sul display
- Dispositivi di sicurezza secondo la normativa DIN EN 13060

Accessori (di serie)

- ZS 110 supporto 6/3 per il trattamento di 6 tray o fino a 3 container, altezza massima per container 48 mm
- ZS 131 tray, 3 pezzi
- Impugnatura per l'estrazione sicura dei tray a fine procedimento

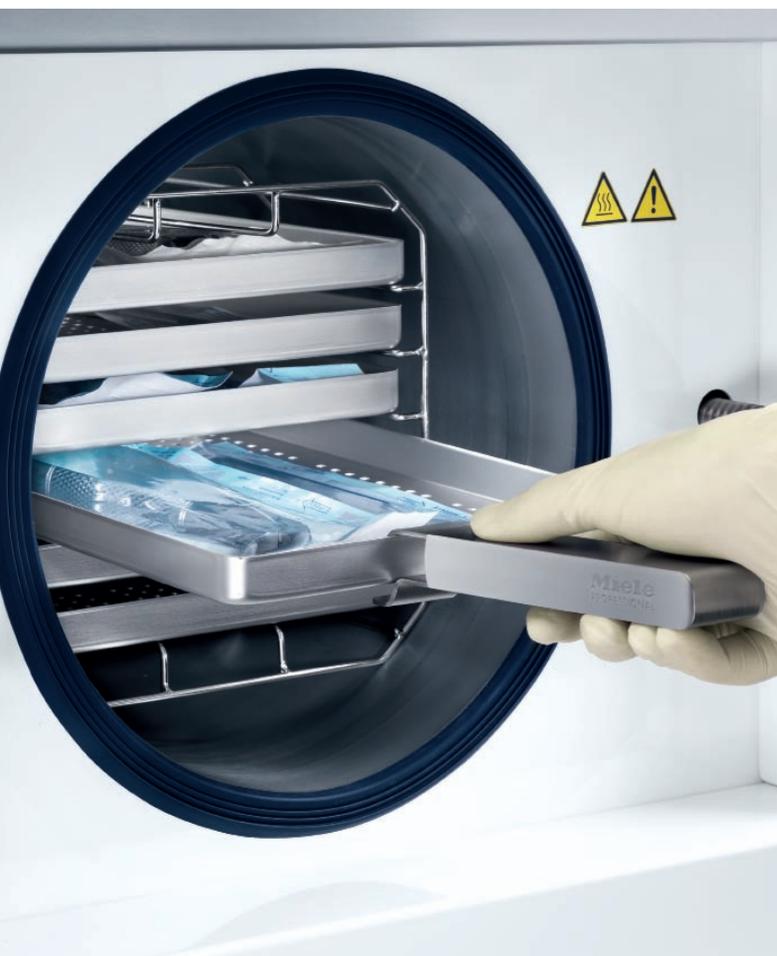

Miele Italia Srl
Str. di circonvallazione, 27
39057 S. Michele-Appiano (BZ)

www.miele-professional.it
info@miele-professional.it



Contact Center
899-809050
Lunedì - Venerdì ore 9-17

Da rete fissa Telecom 22,93 cent/min + 10,33 cent alla risposta; da altre reti rivolgersi al proprio operatore. Richiedere eventualmente l'abilitazione al gestore telefonico.

I servizi Miele

- Progettazione "su misura"
- Convalida di procedimenti di lavaggio
- Qualificazione (IQ/OQ)
- SAP e FAT
- Contratti di manutenzione
- Segnalazione guasti a distanza
- Noleggio apparecchiature
- Detergenti

